


使用说明
泰它西普注射液
(预充式注射器)

本使用说明包含如何使用泰它西普预充式注射器的全部内容

使用泰它西普预充式注射器前，请完整阅读本说明书。如果医生决定可以由您或您的看护者注射泰它西普注射液，您或您的看护者应该接受培训，充分了解如何准备和注射泰它西普预充式注射器，否则不得注射本品。请妥善保管本说明书，并在需要时阅读参考。

泰它西普预充式注射器的示意图

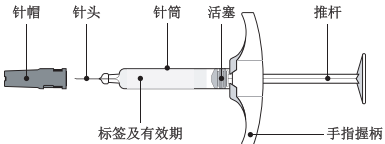

重要信息

- 您必须完全注射 240 mg (80 mg/支 ×3支) 本品，以保证注射完整的 1 个剂量。
- 每次注射**请勿**超过 1 个剂量。
- 请勿**错过任何 1 个剂量。如果错过，请立即进行补充注射，并根据该次注射时间安排后续剂量的注射。
- 请勿**重复使用泰它西普预充式注射器，每支注射器仅供一次使用。
- 注射器含玻璃部件，小心使用。
- 如果注射器掉落到地面或损坏，**请勿**使用该注射器，使用新的注射器进行注射。
- 您的医生或护士可指导您选择注射部位。
- 请勿**将注射器的针头插入皮肤超过一次，因为这可能弯折针头并导致皮肤刺伤。
- 准备好注射前，**请勿**触碰推杆或取下针帽。
- 请勿**回拉推杆。
- 请勿**隔着衣服进行注射。
- 请您严格遵守当地相关法规要求销毁未使用的药品或废弃物料。
- 如果您对泰它西普预充式注射器有任何疑问或需要帮助，请咨询您的医生、药师或护士。

如何储存泰它西普预充式注射器

- 将注射器储存在原包装盒内，存放于 2℃至 8℃的冰箱中。
- 将注射器放置在儿童无法接触到的地方。
- 请勿**将注射器在室温环境（10℃至 30℃）储存超过 24 小时。
- 请勿**使用任何热源加热注射器，如微波、热水或阳光直射。
- 请勿**冷冻注射器。
- 请勿**摇晃注射器。
- 如果以上任何一种情况出现，**请勿**使用该注射器。使用新的注射器进行注射。

注射泰它西普注射液前的准备


步骤 1：准备材料

将 3 盒装有注射器的包装盒从冰箱中取出，检查所有包装盒上标注的有效期以及是否存在破损。确认无误后将装有注射器的包装盒与其它所需物品一起放置在干净、平整的平面上。

- 如果包装盒身存在穿孔或易撕开口破损，**请勿**使用该注射器。
- 如果产品过期，**请勿**使用。

您将用到以下物品：

- 泰它西普预充式注射器
- 若干酒精棉片（未提供）
- 若干棉球或纱布（未提供）
- 锐器盒（未提供）

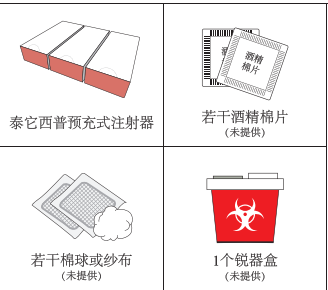

步骤 2：恢复室温

将装有注射器的包装盒放置在室温环境（10℃至 30℃）等待 30 分钟，使药品恢复至室温。




- 请勿**使用微波、热水或阳光直射下加热注射器。
- 如果您的注射器在室温放置的时间超过 24 小时，则**请勿**使用该注射器。

步骤 3：取出泰它西普预充式注射器

用拇指按压包装盒上的易撕开口打开包装盒，取出内部的铝塑泡罩盒，再从泡罩盒上的易撕口处揭开铝塑盖膜，最后握住注射器针筒中部，小心地从泡罩盒中将注射器取出。

- 如果铝塑泡罩盒或铝塑盖膜上存在穿孔或破损，**请勿**使用该注射器。
- 将铝塑盖膜完全撕去后，再取出注射器。
- 取出注射器的过程中，**请勿**触碰推杆或针帽。
- 准备好注射前，**请勿**拔下针帽。

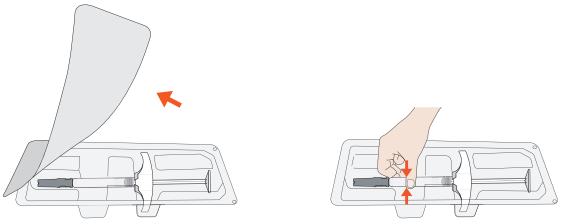

步骤 4：检查泰它西普预充式注射器

检查注射器有无任何缺损。


- 如果您观察到注射器存在任何缺损或注射器曾掉落到地面，**请勿**使用该注射器。
- 如果观察到针帽丢失、破裂、缺损，或者针帽没有牢固的连接在注射器上，**请勿**使用该注射器。

检查注射器标签上的有效期。

- 如果产品过期，**请勿**使用该注射器。

检查注射器内的药液，药液应澄清。您可能看到注射器内有气泡，这是正常现象。


- 如果药液是结冰状态，**请勿**使用该注射器。
- 如果药液是浑浊的或者含有颗粒，**请勿**使用该注射器。

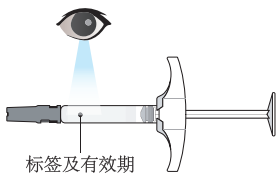

步骤 5：选择注射部位


请为每一次注射选择不同的注射部位。如果您想在同一区域进行注射，请确保每次注射部位与上次注射部位之间相隔至少 5 厘米。

- 您自己或者看护者可以在您的大腿前部或下腹部进行注射，但**请勿**在肚脐周围 5 厘米以内的区域进行注射。

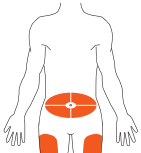

自行注射或看护者操作

- 如果您选择在上臂外侧进行注射，则需要看护者进行操作。

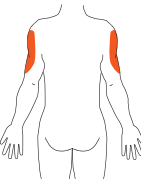


看护者操作

- 请勿**在有皮肤损伤的区域（比如瘀伤、肿胀、发红、发硬的区域）进行注射，也不要 在有疤痕或妊娠纹的区域进行注射。

步骤 6：注射部位清洁

使用注射器前，用肥皂和热水彻底清洗双手。使用酒精棉片清洁注射部位，并使其自然晾干。


- 注射前**请勿**触摸清洁部位的皮肤。

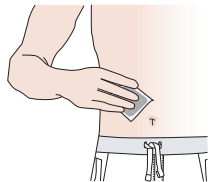

注射泰它西普注射液

步骤 7：取下针帽


一只手稳固的抓住注射器针筒中部，另一只手水平将针帽拔出。

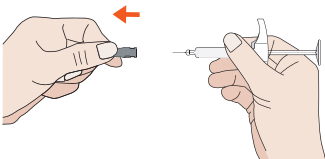

- 请勿**排除注射器内的气泡。
- 针帽拔出后**请勿**盖回。
- 请勿**触碰针头。
- 您可能在针尖上看到一滴液体，这是正常现象。


步骤 8：捏起注射部位皮肤并插入针头

轻轻捏住注射部位的皮肤，将注射器针头以约 45 度角完全插入皮肤。

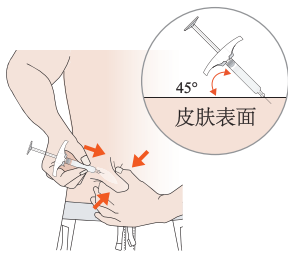

步骤 9：放松握起的皮肤


松开捏住皮肤的手，然后握住注射器底部以稳定注射器。

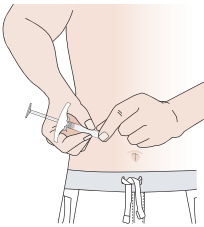

步骤 10：注射


拇指缓慢且平稳的推动推杆直到推不动为止，注射全部药物。

- 您会感受到一些阻力，这是正常的。
- 注射过程中**请勿**移动注射器针头，避免刺伤。

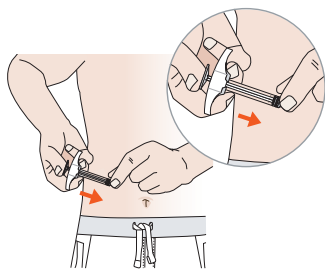

步骤 11：完成注射

注射完成后，小心地按照针头插入时的角度从注射部位将注射器提起。

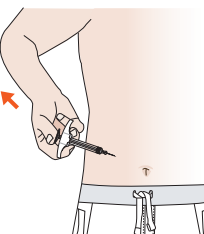

步骤 12：使用后处置

将使用后的注射器以及针帽丢弃到锐器盒中。

- 不要把针帽重新盖回，该操作可能会导致刺伤。
- 不要将用过的注射器丢弃到生活垃圾中。
- 确保锐器盒远离孩童的视线和接触范围。



步骤 13：检查注射部位

注射部位可能会轻微出血，这是正常的。使用棉球或纱布按压注射部位 10 秒进行止血。

- 请勿**摩擦注射部位。
- 如果需要，在注射部位贴上创可贴。

第 1 针完成注射

重要信息：重复上述步骤继续完成第 2 针和第 3 针的注射。您必须完全注射 3 支本品以保证完整的剂量，并请确保每次注射部位与上次注射部位之间相隔至少 5 厘米。

如何处置锐器盒：

当您的锐器盒快满时，请根据您当地的法规进行妥善处置。

- 请勿**重复利用装满的锐器盒。



产品名称/Product Name	: 泰它西普注射液说明书-背
物料号/Item NO	: RC18-L-PPM-004-01
成品尺寸/Finish Product Size	: 450 x 280mm
字体/Typeface	: 黑体、宋体、Times New Roman
折叠尺寸/Fold Size	: 70 x 45mm
制作人 /Designer	: 刘畅
制作日期 /Design Time	: 2026.06.10
颜色/Colours	: Black Cyan Magenta Yellow
客户确认/Signature By Customer	:

尊敬的客户 /Dear customer:
请您仔细审阅以上内容及图稿文字字体、大小、排列、内容、色相、层次、盒型结构、尺寸，并签字确认，我们将以此稿作为制版依据。

Please confirm above content, and then text font, size, arrangement, content, hue, level, structure, size on the drawing, we will follow to make plate.